


## QuickFISH® komplet za fiksaciju - BC

### QuickFISH komplet za fiksaciju krvnih kultura

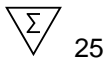

QFFIXBC1-25

#### Sadržaj

Reagensi i mikroskopska stakla u QuickFISH BC kompletu za fiksiranje namijenjena su za uporabu s QuickFISH BC kompletima za identifikaciju kultura, sukladno uputama napisanima u njima priloženim uputama za uporabu.

#### Reagensi

##### QuickFISH BC komplet za fiksaciju

Svaki komplet sadrži dovoljno materijala za 25 testova. Reagensi se isporučuju spremni za uporabu. Rok valjanosti kompleta naveden je na vanjskoj etiketi na kutiji.

**QuickFISH stakalce** QuickFISH stakalce CS012

25 QuickFISH predmetnih stakalaca s kontrolama.

**QuickFix-1** QuickFix-1 CP0169

Primarna otopina za fiksaciju.

**QuickFix-2** QuickFix-2 CP0170

Sekundarna otopina za fiksaciju.

#### Upozorenja i mjere opreza

##### Sigurnosne mjere opreza

QuickFix-1	Sadrži 24% etanola	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. Dostupan je u kompletu za fiksaciju QuickFISH.
QuickFix-2	 Opasnost Sadrži 97% metanola	Vrlo lako zapaljiva tekućina i para. Otrovnost ako se proguta. Otrovnost u dodiru s kožom. Otrovnost ako se udiše. Uzrokuje oštećenje središnjeg živčanog sustava. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. Dostupan je u kompletu za fiksaciju QuickFISH.

Ne jedite, ne pušite, ne rabite kozmetičke proizvode, ne čuvajte i ne pripremajte hranu u radnom prostoru.

Reagense zbrinite sukladno saveznim, državnim i lokalnim propisima.

##### Tehničke mjere opreza

Reagensi se ne smiju koristiti nakon isteka roka otisnutog na etiketama.

Reagensi se isporučuju u točno određenim koncentracijama.

Djelotvornost testa može biti narušena mijenjaju li se reagensi na bilo

koji način ili se ne čuvaju u preporučenim uvjetima navedenima u odlomku "Čuvanje sastojaka kompleta".

Izbjegavajte mikrobiološku kontaminaciju reagensa.

Izbjegavajte svaku križnu kontaminaciju uzoraka i reagensa jer ona može dovesti do pogrešnih rezultata.

Ne dopustite da vrh bočice-kapaljke dodirne razmaz jer to može uzrokovati križnu kontaminaciju između stakalaca ili kontaminaciju reagensa.

#### Čuvanje i priprema sastojaka kompleta

Da bi se osigurala optimalna djelotvornost kompleta, važno je da se sastojci kompleta čuvaju sukladno sljedećim uputama:

Sastojke kompleta čuvajte na temperaturi 2-8°C. Bočice čuvajte uspravno i dobro ih zatvorite nakon uporabe. Prije uporabe, ostavite sastojke kompleta na sobnoj temperaturi, a nakon uporabe vratite ih na 2-8°C.

QuickFISH stakalca isporučuju se u pojedinačno zavarenim vrećicama s dušikom i desikantom. Stakalca čuvajte na temperaturi 2-8°C. Stakalca se moraju upotrijebiti odmah nakon otvaranja vrećice. Ne upotrebljavajte stakalca nakon isteka roka valjanosti.

#### Definicije

<b>REF</b>	Šifra proizvođača/kataloški broj	<b>LOT</b>	Broj serije
	Pogledajte upute za uporabu		Ograničenja temperature čuvanja
	Sadržaj dovoljan za <n> testova		Opasno po zdravlje
	Proizvođač		Lubanja i prekrizene kosti
<b>EC</b> <b>REP</b>	Ovlašteni predstavnik		Plamen
	Upotrijebiti do		

#### Tehnički savjeti i služba za korisnike

Za sva pitanja, molimo obratite se tvrtki OpGen ili svom lokalnom distributeru.



OpGen, Inc.  
708 Quince Orchard Rd  
Gaithersburg, MD 20878  
SAD

Tel: +1 301 869 9683  
Telefaks: +1 301 869 9684

[techsupport@opgen.com](mailto:techsupport@opgen.com)



Curetis GmbH  
Max-Eyth-Straße 42  
71088 Holzgerlingen,  
Germany

Tel: +49 7031 49195 10  
Telefaks: +49 7031 49195 19

[www.OpGen.com](http://www.OpGen.com)